
Einheiten definieren in Küchensteuerung und Stammdatentool




Vorwort / Beschreibung

Die definierten Einheiten werden sowohl bei Stationsbedarfsartikeln als auch bei Komponenten verwendet. Bis zur Version 113.2 konnten Einheiten in der Küchensteuerung definiert werden. Ab der Version 113.3 werden diese ausschließlich im Stammdatentool erfasst. Die folgende Beschreibung teilt sich aus diesem Grund in beide Versionen auf.


Bis Version 113.2

Starten Sie die Küchensteuerung. Sie finden den Menüpunkt unter Stammdaten -> Zusätze -> Einheiten.

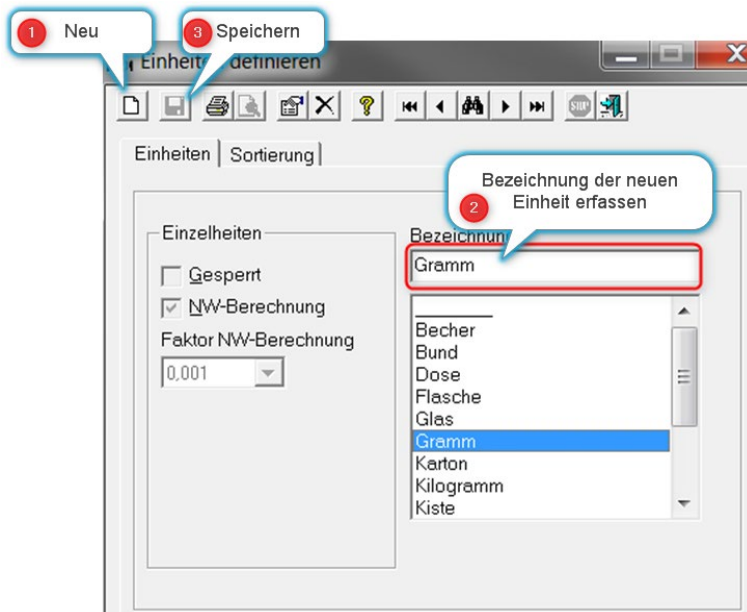


Einzelheiten:

- Gesperrt - Gesperrte Einheiten können nicht mehr verwendet werden.
- NW-Berechnung - Einheiten mit dieser Funktion können beim Definieren von Komponenten als Gewichtseinheit hinterlegt werden.
- Faktor NW-Berechnung - Umrechnungsfaktor der Einheit zur gewählten Gewichtseinheit

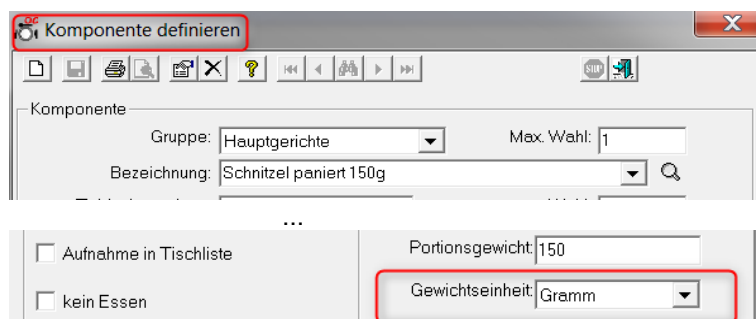

Tipp: Beschränken Sie sich bei Einheit für die NW-Berechnung auf Gramm und/oder Milliliter, da im Portionsgewicht nur ganze Zahlen eingegeben werden können.

Sortierung:

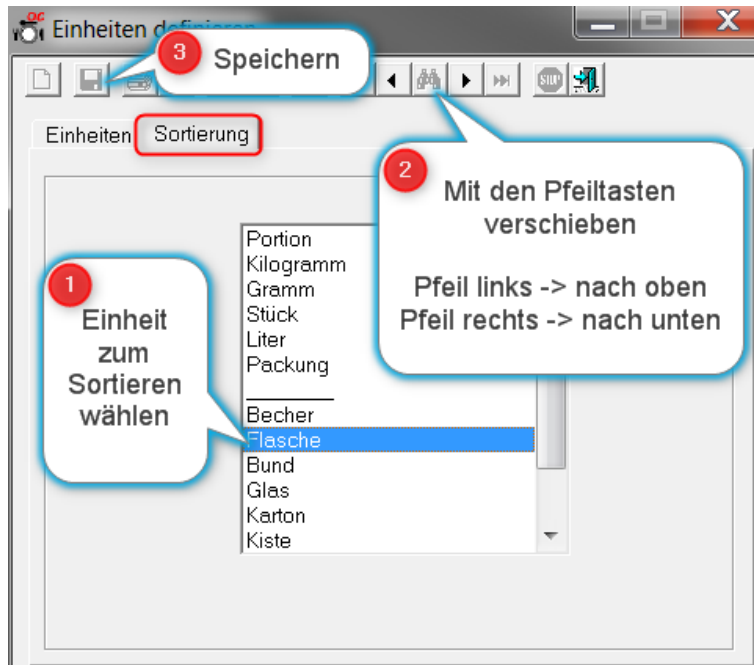

Ab Version 113.3



Ab dieser Version sind die Einheiten ausschließlich im Stammdatentool zu pflegen.

Service-Management Stammdaten

LMS Sortierung

Neuer Datensatz Änderungen speichern Datensatz löschen Abbrechen Suchen

Erster Datensatz Vorherige Seite Vorheriger Datensatz Nächster Datensatz Nächste Seite Letzter Datensatz

Gesperrte Einträge anzeigen Expertenmodus aktivieren Max. Spaltenbreite 250

Einheit	Beschreibung	Kurzbeschreibung	NW-Berechnung	Faktor NW-Berechnung	Fremdschlüssel	Fremddatenänderung	Fremdschlüsselquelle	Gesperrt	Hervorhebung	Sortiernummer
Portion	Portion			1						1
Kilogramm	Kilogramm			0,001	1					2
Stück	Stück			1	3					3
Liter	Liter			0,001	4					4
Packung	Packung			1						5
Becher	Becher			1						6
Bund	Bund			1						7
Flasche	Flasche			1	36		HR_MBS5			8
Glas	Glas			1						9
Karton	Karton			1	19					10
Kiste	Kiste			1	14		HR_MBS5			11
Tetrapack	Tetrapack			1						12
Person	Person			1						13
Stunde	Stunde									14
Gramm	Gramm				2					15
Milliliter	Milliliter				5					16
Milligramm	Milligramm				7					17
										18
										19

Einheit 2

Küche 1

1 Küche wählen
2 Einheit wählen
3 Symbol "Neuer Datensatz" anklicken

Nun wird eine zusätzliche leere Zeile in der Erfassungstabelle angehängt.

Service-Management Stammdaten

LMS

Neuer Datensatz Änderungen speichern Datensatz löschen Abbrechen Suchen

Erster Datensatz Vorherige Seite Vorheriger Datensatz Nächster Datensatz Nächste Seite Letzter Datensatz

Gesperrte Einträge anzeigen Expertenmodus aktivieren Max. Spaltenbreite 250

Speichern

Einheit	Beschreibung	Kurzbeschreibung	NW-Berechnung	Faktor NW-Berechnung	Fremdschlüssel	Fremddatenänderung	Fremdschlüsselquelle	Gesperrt	Hervorhebung	Sortiernummer
Portion	Portion			1						1
Kilogramm	Kilogramm			0,001	1					2
Stück	Stück			1	3					3
Liter	Liter			0,001	4					4
Packung	Packung			1						5
Becher	Becher			1						6
Bund	Bund			1						7
Flasche	Flasche			1	36		HR_MBS5			8
Glas	Glas			1						9
Karton	Karton			1	19					10
Kiste	Kiste			1	14		HR_MBS5			11
Tetrapack	Tetrapack			1						12
Person	Person			1						13
Stunde	Stunde									14
Gramm	Gramm				2					15
Milliliter	Milliliter				5					16
Milligramm	Milligramm				7					17
										18
										19


Füllen Sie die einzelnen Felder aus (Pflichtfelder sind Beschreibung und Kurzbeschreibung)

1

Bedeutung der restlichen Spalten:

NW-Berechnung	Einheiten mit dieser Funktion können beim Definieren von Komponenten als Gewichtseinheit hinterlegt werden.
Faktor NW-Berechnung	Umrechnungsfaktor der Einheit zur gewählten Gewichtseinheit (s.o.). <i>Der Faktor der Nährwertberechnung muss in unserem Beispiel bei Kilogramm und Liter 0,001 hinterlegt betragen.</i>
Fremdschlüssel	Hierbei handelt es sich um die ID, die aus dem Warenwirtschaftsprogramm übermittelt wurde.
Fremddatenänderung	Der Haken wird automatisch gesetzt, wenn Einträge aus einem Warenwirtschaftsprogramm übermittelt, aber von Ihnen manuell geändert wurden.
Fremdschlüsselquelle	Anzeige der Fremddatenquelle (z.B. MBS5). Diese sollte nicht manuell geändert werden.
Gesperrt	Diese Eigenschaft wird vergeben, wenn die Einheit nicht mehr benötigt wird.
Hervorhebung	Dieser Programmpunkt ist derzeit noch nicht verfügbar.
Sortiernummer	Festlegung der Reihenfolge der Einheit für die Anzeige bei Komponenten oder Stationsbedarfsartikeln.

Sortierung:

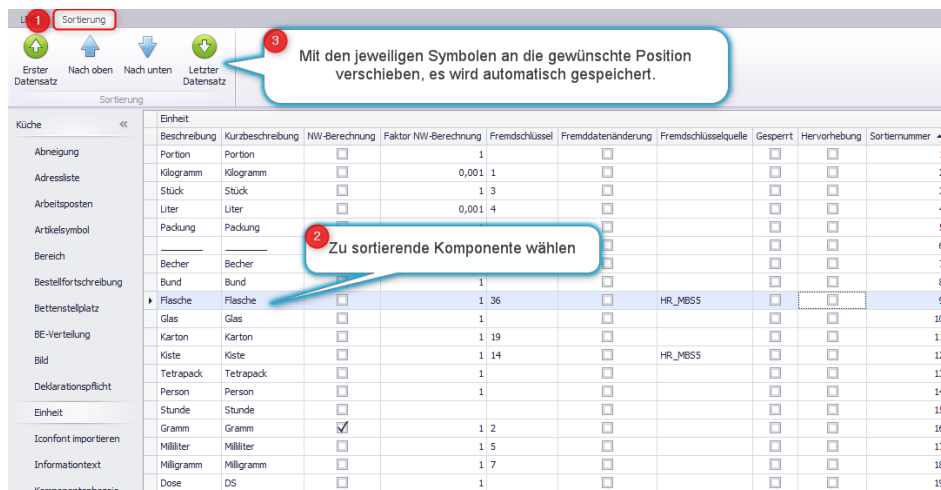

Sortierung

Erster Datensatz Nach oben Nach unten Letzter Datensatz

Mit den jeweiligen Symbolen an die gewünschte Position verschieben, es wird automatisch gespeichert.

Einheit	Beschreibung	Kurzbeschreibung	NW-Berechnung	Faktor NW-Berechnung	Fremdschlüssel	Fremddatenänderung	Fremdschlüsselquelle	Gesperrt	Hervorhebung	Sortiernummer
Portion	Portion		<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Kilogramm	Kilogramm		<input type="checkbox"/>	0,001	1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Stück	Stück		<input type="checkbox"/>	1	3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Liter	Liter		<input type="checkbox"/>	0,001	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Packung	Packung		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Becher	Becher		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Bund	Bund		<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Flasche	Flasche		<input type="checkbox"/>	1	36	<input type="checkbox"/>	HR_MBS5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
Glas	Glas		<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Karton	Karton		<input type="checkbox"/>	1	19	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
Kiste	Kiste		<input type="checkbox"/>	1	14	<input type="checkbox"/>	HR_MBS5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
Tetrapack	Tetrapack		<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
Person	Person		<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14
Stunde	Stunde		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
Gramm	Gramm		<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16
Milliliter	Milliliter		<input type="checkbox"/>	1	5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17
Milligramm	Milligramm		<input type="checkbox"/>	1	7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18
Dose	DS		<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19

Zu sortierende Komponente wählen

OrgaCard
Siemantel & Alt GmbH
Industriestraße 24
91126 Rednitzhembach
Tel.: +49(0)9122/1809-0
Fax: +49(0)9122/1809-52
E-Mail: kontakt@orgacard.de
Web: www.orgacard.de

© Copyright 2020 by OrgaCard Siemantel & Alt GmbH

Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers vervielfältigt oder reproduziert werden.