

Einstellung der Tablets im Konfigurationsmanager

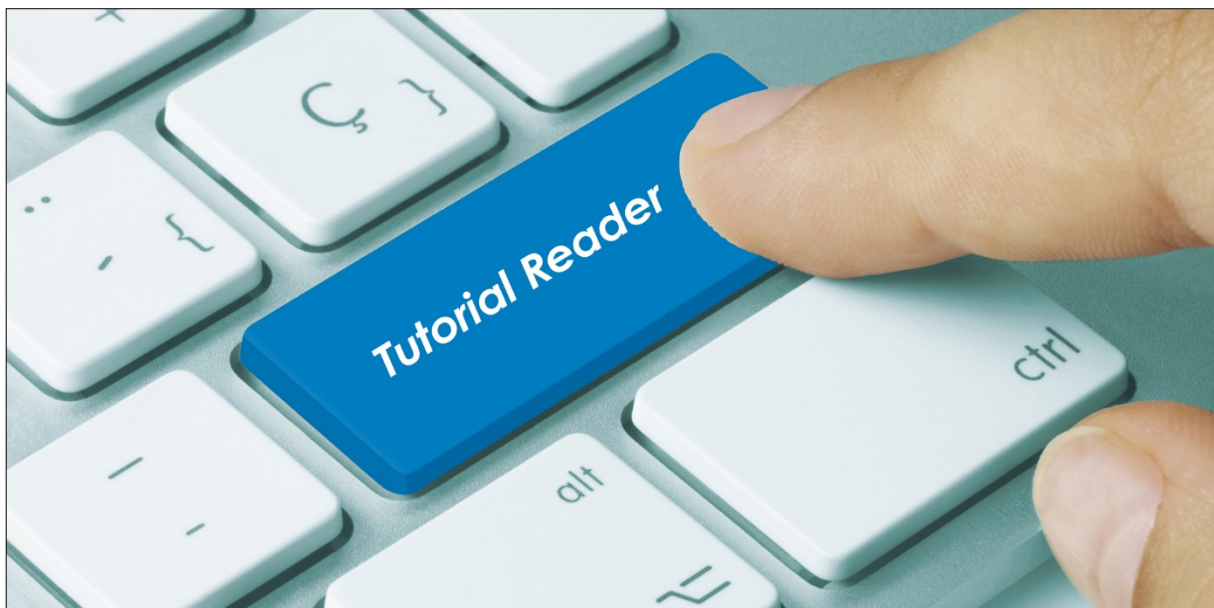

Vorwort:

In dem Handout wird Ihnen beschrieben wie Sie die Tablets mit den verschiedenen Parametern im Konfigurationsmanager einstellen und kopieren können.

Kopieren von einem funktionierenden Geräteprofile und Anpassung der Stationen:

1. Gehen Sie unter Einstellungen auf „Mobile Geräte“
2. Wählen Sie das Tablet von dem Sie kopieren möchten aus
3. Gehen Sie unten rechts auf „Profil kopieren“

Parameter	Wert	Beschreibung
device.synchronization.access	Ja	Zugriff für Benutzer gewähren
device.synchronization.change.a	Ja	Änderung der Unverträglichkeiten zulassen
device.synchronization.change.d	Ja	Änderung der Kostformen zulassen
device.synchronization.change.d	Ja	Änderung der Abneigungen zulassen
device.synchronization.change.i	Ja	Erfassung von Zusatzinformationen zu einem Essens Teilnehmer zulassen (PATIENT MEMO)
device.synchronization.change.p	Ja	Ändern der Standard-Portionsgröße zulassen
device.synchronization.change.p	Ja	Änderung der Zubereitungsformen zulassen
device.synchronization.consump	Ja	Verzehrverhalten der Teilnehmer erfassen (muss im Lizenzschlüssel freigeschaltet sein)
device.synchronization.floorstoc	Ja	Stationsbedarf-Bestellungen zulassen
device.synchronization.floorstoc	Ja	Keine Änderungen an verbuchten Stationsbedarfsbestellungen zulassen
device.synchronization.floorstoc	Ja	Überwachung des Budgets für Stationsbedarfsbestellungen aktivieren
device.synchronization.floorstoc	Ja	Berücksichtigung der Bestellzeit (d.h. danach sollen keine Stationsbedarfsbestellungen mehr möglich sein)
device.synchronization.floorstoc	7	Anzahl der Tage, für die Stationsbedarf im Voraus bestellt werden kann
device.synchronization.floorstoc	0	Als vorangestellter Bestelltag soll heute plus X Tage verwendet werden
device.synchronization.floorstoc	23:59	GRÜTZUNG: die Tage VOR dem Bestellenen Tag können NICHT mehr ausgewählt werden, auch nicht manuell! D.h. bei heute = 1 (= MO/GEF) können KEINE Bestellungen mehr für HEUTE angepasst oder gemacht werden! Uhrzeit, bis zu der STB-Bestellungen erfasst bzw. geändert werden dürfen (Vorsicht: ist verknüpft mit dem Tagesoffset!) (überschreibt die entsprechende Systemeinstellung)
device.synchronization.floorstoc	7,8,20,21,22,28,29,30	IDs der Stationen (durch Komma getrennt), die mit dem Gerät erfasst werden sollen. Voraussetzung STATION FLOORSTOCK = 1
device.synchronization.order.die	Ja	Bestellung gemäß Kostprofil erstellen (manuelle Aufnahme / Kostformwechsel)
device.synchronization.order.su	Ja	Übersnahme der Bestellungen des Vortags zulassen
device.synchronization.orderday	7	Anzahl der Tage, für die im Voraus bestellt werden kann
device.synchronization.orderfro	0	Starttag-Offset
device.synchronization.places	7,8	Stationen, die mit dem ausgewählten Gerät befragt werden sollen
device.synchronization.show.ord	Ja	Bestellstatus der Mahlzeiten anzeigen
device.synchronization.specialre	Ja	Wunschkost-Bestellungen zulassen
device.synchronization.specialre	Ja	Erfassung neuer Wunschkost-Komponenten zulassen
device.synchronization.weekord	Ja	Wochenbestellung aktivieren
device.synchronization.checkbok	1	Unbekannt: device.synchronization.checkbooked
device.synchronization.end_mes	3	Unbekannt: device.synchronization.end_meal_sortno
device.synchronization.start_me	1	Unbekannt: device.synchronization.start_meal_sortno

ID	Quell-MDE
21	tablet-cp
6	tabletfb
31	tabletfb
5	tabletfb
7	tabletfb
30	tabletfb
4	tabletfb
29	mobileclient-cp
28	mobileclient-fb
32	mobileclient-kf
38	mobileclient-mf
39	mobileclient-ps
34	mobileclient-sw
40	mobileclient-th
22	smartapp01
23	smartapp02
24	smartapp03
25	smartapp04
26	smartapp05
27	smartapp06
33	smartapp07
41	smartapp08

ID	Ziel-MDE
<input type="checkbox"/>	6 tabletfb
<input type="checkbox"/>	31 tabletfb
<input checked="" type="checkbox"/>	5 tabletfb
<input type="checkbox"/>	7 tabletfb
<input type="checkbox"/>	30 tabletfb
<input type="checkbox"/>	4 tabletfb
<input type="checkbox"/>	29 mobileclient-cp
<input type="checkbox"/>	28 mobileclient-fb
<input type="checkbox"/>	32 mobileclient-kf
<input type="checkbox"/>	38 mobileclient-mf
<input type="checkbox"/>	39 mobileclient-ps
<input type="checkbox"/>	34 mobileclient-sw
<input type="checkbox"/>	40 mobileclient-th
<input type="checkbox"/>	22 smartapp01
<input type="checkbox"/>	23 smartapp02
<input type="checkbox"/>	24 smartapp03
<input type="checkbox"/>	25 smartapp04
<input type="checkbox"/>	26 smartapp05
<input type="checkbox"/>	27 smartapp06
<input type="checkbox"/>	33 smartapp07
<input type="checkbox"/>	41 smartapp08

4. Tablet als Kopiervorlage wählen
5. Tablet auswählen auf das kopiert werden soll
6. Auf „Kopieren“ gehen

Nachdem Sie die Einstellungen auf weitere Tablets kopiert haben, können Sie die Stationszuordnungen anpassen. Hierbei ist zu beachten, dass Sie dies einmal für die Menübestellung und einmal für den Stationsbedarf durchführen müssen.

device.synchronization.places	7,8	1	Stationen, die mit dem ausgewählten Gerät befragt werden sollen
device.synchronization.floorstock.places	8,7	2	ID's der Stationen (durch Komma getrennt), die mit dem Gerät erfasst werden sollen. Voraussetzung STATION.FLOORSTOCK = 1

1. Parameter für die Stationszuordnung für die Menübestellung
2. Parameter für die Stationszuordnung für den Stationsbedarf

Um die Stationen für den Stationsbedarf oder Menübestellung den Tablets zu zuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

device.synchronization.places 7,8 1 Stationen, die mit dem ausgewählten Gerät befragt werden sollen

Stationen zuordnen

Nicht ausgewählte Stationen

ID	Station
<input type="checkbox"/> 20	OP 01
<input type="checkbox"/> 21	Endoskopie
<input type="checkbox"/> 22	Station 03
<input type="checkbox"/> 29	Station 05
<input type="checkbox"/> 30	Quarantäne
<input type="checkbox"/> 35	Teststation
<input type="checkbox"/> 28	Station 04

Ausgewählte Stationen

ID	Station
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Station 01
<input checked="" type="checkbox"/> 8	Station 02

Alle auswählen

Alle zurücksetzen

Übernehmen

Abbrechen

1. Mit der linken Maustaste mit einen Doppelklick bei den entsprechenden Parameter in das Feld „Wert“ klicken
2. Stationen auswählen
3. Auf übernehmen gehen
4. Zum Abschluss Profil speichern

„Grundkonfiguration“ eines Gerätes, wie sie auch bei der Installation eingerichtet wird

Parameter	Wert	Beschreibung
device.synchronization.access	Ja	Zugriff für Benutzer gewähren
device.synchronization.change.allergy	Nein	Änderung der Unverträglichkeiten zulassen
device.synchronization.change.diet	Nein	Änderung der Kostformen zulassen
device.synchronization.change.dislike	Nein	Änderung der Abneigungen zulassen
device.synchronization.change.information	Nein	Erfassung von Zusatzinformationen zu einem Essensteilnehmer zulassen (PATIENT.MEMO)
device.synchronization.change.portion	Nein	Ändern der Standard-Portionsgröße zulassen
device.synchronization.change.preparation	Nein	Änderung der Zubereitungsformen zulassen
device.synchronization.floorstock	Ja	Stationsbedarf-Bestellungen zulassen
device.synchronization.floorstock.checkbooke	Ja	Keine Änderungen an verbuchten Stationsbedarfsbestellungen zulassen
device.synchronization.floorstock.checkordert	Ja	Berücksichtigung der Bestelluhrzeit (d.h. danach sollen keine Stationsbedarfsbestellungen mehr möglich sein)
device.synchronization.floorstock.orderdaysa	7	Anzahl der Tage, für die Stationsbedarf im Voraus bestellt werden kann
device.synchronization.floorstock.orderfromoff	1	Als voreingestellter Bestelltag soll heute plus X Tage verwendet werden. <small>ACHTUNG: Die Tage VOR dem festgelegten Tag können NICHT mehr ausgewählt werden, auch nicht manuell. D.h. bei heute = 1 (a. MORGEN) können KEINE Bestellungen mehr für HEUTE angesehen oder gemacht wer- den. IDs der Stationen (durch Komma getrennt), die mit dem Gerät erfasst werden sollen. Voraussetzung STATION FLOORSTOCK = 1</small>
device.synchronization.floorstock.places	8,7	
device.synchronization.order.suggestion	Ja	Übernahme der Bestellungen des Vortags zulassen
device.synchronization.orderdaysahead	7	Anzahl der Tage, für die im Voraus bestellt werden kann
device.synchronization.orderfromoffset	1	Starttag-Offset
device.synchronization.places	7,8	Stationen, die mit dem ausgewählten Gerät befragt werden sollen
device.synchronization.weekorder	Ja	Wochenbestellung aktivieren

Kopieren von Parametern mit „Wert“ auf weitere Tablets:

Parameter	Wert	Beschreibung
device.synchronization.access	Ja	Zugriff für Benutzer gewähren
device.synchronization.change.allergy	<input type="text" value="1"/>	Änderung der Unverträglichkeiten zulassen
device.synchronization.change.diet	Nein	

Den Wert des Parameters device.synchronization.change.allergy auf weitere MDE's übertragen

Tablet PC's oder Smartphones

ID	Tablet PC's oder Smartphones
<input checked="" type="checkbox"/>	21 tablet-cp
<input type="checkbox"/>	6 tablet-fb
<input type="checkbox"/>	31 tablet-kf
<input type="checkbox"/>	5 tablet-mf
<input type="checkbox"/>	7 tablet-ps
<input type="checkbox"/>	30 tablet-sw

Alle auswählen Alle zurücksetzen

Parameter einfügen, wenn noch nicht im Profil vorhanden

Übernehmen


tablet-th

Der Wert 1 für den optionalen Parameter device.synchronization.change.allergy wurde auf alle gewählten MDE's übertragen

OK

1. Gehen Sie mit der rechten Maustaste bei dem entsprechenden Parameter auf das blaue Feld „Wert“ und klicken anschließend auf „Den Wert des Parameters...auf weitere MDE's übertragen“ an.
2. Wählen Sie die Tablets aus, auf die der Parameter kopiert werden soll.
3. Haken bei „Parameter einfügen, wenn noch nicht im Profil vorhanden“ setzen.
4. Auf „Übernehmen“ gehen
5. Mit „OK“ bestätigen

Neue Parameter hinzufügen:

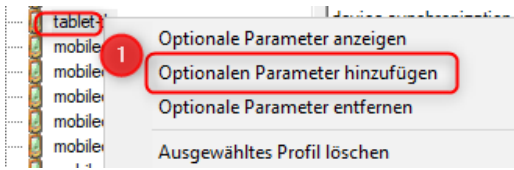


tablet-th - Optionalen Parameter hinzufügen

Parametername:	Beschreibung
<input type="checkbox"/> device.synchronization.account	Nur aktivierbar, wenn die Teilnehmerart Kontoführung hat, eine Komponente kostenpflichtig ist und der Parameter "device.synchronization.account.type" aktiviert ist.
<input type="checkbox"/> device.synchronization.account.type	Kontotyp: nur Preisinformation oder internes Konto
<input type="checkbox"/> device.synchronization.consumption	Verzehrverhalten der Teilnehmer erfassen (muss im Lizenzschlüssel freigeschaltet sein!)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.dailydietaassignment	Web: Tagesbezogene Kostformzuordnung aktivieren (nur Sonderversion Basel!)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.dailyspecial.show	Tagesempfehlung anzeigen
<input type="checkbox"/> device.synchronization.delay.out	Verzögerung bei ausgehenden Daten (in Sekunden)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.delete.device.db	Nach dem Datenbankabgleich, der nach der Befragung der Essensteilnehmer durchgeführt wird, die Löschung der Patientendaten unterstützen
<input type="checkbox"/> device.synchronization.deletegesture	Lösch-Gesten (Wischen) auf dem Tablet PC oder Smartphone unterstützen
<input type="checkbox"/> device.synchronization.firstorderdate.changeparticipant	Nach jedem Teilnehmerwechsel Rücksprung auf den ersten Bestelltag
<input type="checkbox"/> device.synchronization.floorstock.booked.noorder	Ja = wurde an diesem Tag mindestens ein Artikel verbucht, kann nicht mehr für diesen Tag bestellt werden. Voraussetzung: "device.synchronization.floorstock.checklimit" aktiviert
<input type="checkbox"/> device.synchronization.floorstock.checklimit	Überwachung des Budgets für Stationsbedarfsbestellungen aktivieren
<input type="checkbox"/> device.synchronization.floorstock.ordertime	Uhrzeit, bis zu der STB-Bestellungen erfasst bzw. geändert werden dürfen (Vorsicht: ist verknüpft mit dem Tagesoffset!) (über "device.synchronization.floorstock.booked.noorder" aktiviert)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.language	Web: Sprache, die bei der Anzeige der gastronomischen Bezeichnungen verwendet werden soll (ist der Standardwert für die Stationen)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.offline.wlanoff	Bei Android-basierten Tablet PC's oder Smartphones im OFFLINE-Mode das WLAN abschalten
<input type="checkbox"/> device.synchronization.order.dietprofile	Web: Bestellung gemäß Kostformprofil erstellen (manuelle Aufnahme / Kostformwechsel)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.orderproposal.use.group.orderinit	Berücksichtigung des Kennzeichens "Bestellfortschreibung" (KOMPGRP.BESTINI) für die Komponentengruppe
<input type="checkbox"/> device.synchronization.scan.bednumber	Auf den mobilen Erfassungsgeräten sollen die Bettnummern der Essensteilnehmer mit Hilfe von Barcodes gescannt werden
<input type="checkbox"/> device.synchronization.show.careclass	Aktivieren der Anzeige der Pflegeklasse. Ist derzeit ohne Funktion!
<input type="checkbox"/> device.synchronization.show.kind	Aktivieren der Anzeige der Teilnehmerart. Ist derzeit ohne Funktion!
<input type="checkbox"/> device.synchronization.show.order.state	Bestellstatus der Mahlzeiten anzeigen
<input type="checkbox"/> device.synchronization.slip.order	Druck der aktuellen Bestellung von einem Tablet-PC oder Smartphone aus auf einen Bon-Drucker zulassen (Voraussetzung: "device.synchronization.slip.order.printername" aktiviert)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.slip.order.printername	Name des Bondruckers, auf den vom Tablet PC oder Smartphone aus gedruckt werden soll (muss im Application Server (Gl) vorhanden sein)
<input checked="" type="checkbox"/> device.synchronization.specialrequest.enable	Web: Wunschkost-Bestellungen zulassen
<input checked="" type="checkbox"/> device.synchronization.specialrequest.enter	Web: Erfassung neuer Wunschkost-Komponenten zulassen
<input checked="" type="checkbox"/> device.synchronization.specialrequest.length	Maximale Länge der Wunschkostbezeichnung im Eingabefeld der Tablet PC's oder Smartphones
<input type="checkbox"/> device.synchronization.start.mealid	Die Mahlzeit, mit der die Befragung beginnt
<input type="checkbox"/> device.synchronization.table.community	Web: Tischgemeinschaft zulassen
<input type="checkbox"/> device.synchronization.transfer.admissions.only	Web: Nur Neuaufnahmen befragen
<input type="checkbox"/> device.synchronization.transfer.nutritional.consulting.not	Web: nur Verpflegungsteilnehmer OHNE Kennzeichnung Ernährungsberatung übertragen (PATIENT.ERB = 0)
<input type="checkbox"/> device.synchronization.transfer.nutritional.consulting.only	Web: nur Verpflegungsteilnehmer MIT Kennzeichnung Ernährungsberatung übertragen (PATIENT.ERB = 1)

Alle auswählen Alle zurücksetzen **3** Hinzufügen Abbrechen

device.synchronization.specialrequest.enable	Ja	Wunschkost-Bestellungen zulassen
device.synchronization.specialrequest.enter	Ja	Erfassung neuer Wunschkost-Komponenten zulassen
device.synchronization.specialrequest.length	15	Maximale Länge der Wunschkostbezeichnung im Eingabefeld der Tablet PC's oder Smartphones

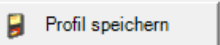1. Mit der linken Maustaste das Tablet markieren und anschließend mit der rechten Maustaste klicken um „Optionale Parameter“ auszuwählen.
2. Die gewünschten Parameter anklicken
3. Auf „Hinzufügen“ gehen
4. Bei den Parametern das mittlere Feld „Wert“ bearbeiten
5. Anschließend unten rechts  Profil speichern

OrgaCard
Siemantel & Alt GmbH
Industriestraße 24
91126 Rednitzhembach
Tel.: +49(0)9122/1809-0
Fax: +49(0)9122/1809-52
E-Mail: kontakt@orgacard.de
Web: www.orgacard.de

© Copyright 2021 by OrgaCard Siemantel & Alt GmbH

Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers vervielfältigt oder reproduziert werden.